


VacuAide 7305

Effiziente Absaugung leicht gemacht



VacuAide 7305

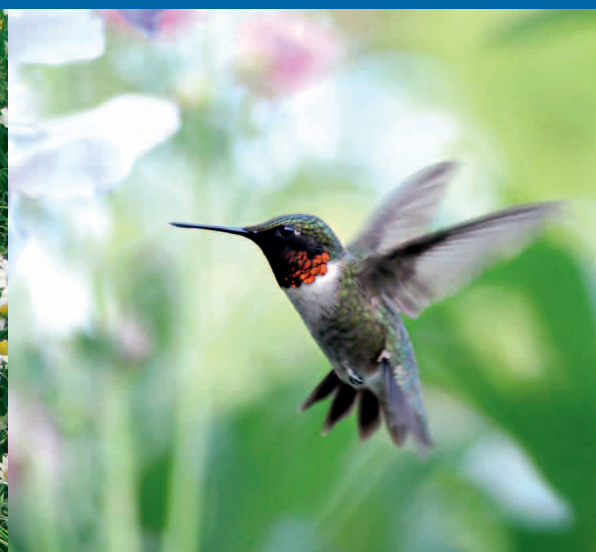

TECHNISCHE DATEN

Abmessungen (H x B x T)

23 x 18 x 20 cm

Gewicht 7305 D-G 1,7 kg

Gewicht 7305 P-G 2,9 kg

Vakuumbereich

50 bis 550 mmHg

Energieverbrauch

ca. 33 Watt

Betriebsspannung

110 bis 240 V; 50 / 60 Hz

Interne Spannung

12 V

Saugleistung (frei Flow)

27 l / min

Temperaturbereich Betrieb

0° C bis + 40° C

Temperaturbereich Lagerung

- 40° C bis + 70° C

Luftfeuchtigkeit Betrieb & Lagerung

0 bis 95 %

HMN für 7305 D-G 01.24.01.0011

HMN für 7305 P-G 01.24.02.1003

Die bewährte Absaugpumpe von DeVilbiss bietet Ihnen durch Ihren robusten Aufbau und die hervorragende Saugleistung ein breites Spektrum an Einsatzmöglichkeiten.

Dank der stufenlosen Vakuumregulierung kann die VacuAide jeder Absaugsituation – sowohl zuhause als auch im klinischen Anwendungsbereich – angepasst werden.

Zwei Versionen der VacuAide sind verfügbar: Die netzbetriebene Standardversion 7305 D-G und eine wiederaufladbare Batterieversion 7305 P-G.

Gemeinsame Merkmale

- Automatische Netzanpassung
- Hohe Saugleistung bis zu 27 l/min
- Stufenlose Vakuumregulierung zwischen 50 und 550 mmHg
- Kompaktes standfestes und robustes Gehäuse
- Integrierter Bakterienfilter
- Mechanischer Übersaugschutz
- Einmalsekretbehälter 800 ccm

Batterieversion 7305 P-G

- Permanenter Akkubetrieb bis zu einer Stunde möglich
- Aufladung durch Netzadapter/Ladegerät

- Tragetasche für bequemen Transport im Lieferumfang enthalten
- Kfz-Ladekabel als Zubehör erhältlich

Anwendungsgebiete

- Sekretabsaugung für Trachealkanülen-Träger
- Im Stationsbereich zur postoperativen Spontanabsaugung oder zur Dauerdrainage
- Kleinere Eingriffe im Nasen-/Rachenraum
- Bei Tonsillektomien
- Trachealabsaugung in der Klinik oder zuhause beim Patienten



Optionaler 1200ml Sekretbehälter, autoklavierbar




DeVilbiss
HEALTHCARE

DeVilbiss Healthcare GmbH
Kamenzer Straße 3
68309 Mannheim
Deutschland
Tel. +49 (0) 6 21 / 1 78 98 - 0
Fax +49 (0) 6 21 / 1 78 98 - 220
www.devilbisshc.com
kontakt@devilbisshc.com

Fachhändler:

VacuAide 7305

Portable Suction Unit

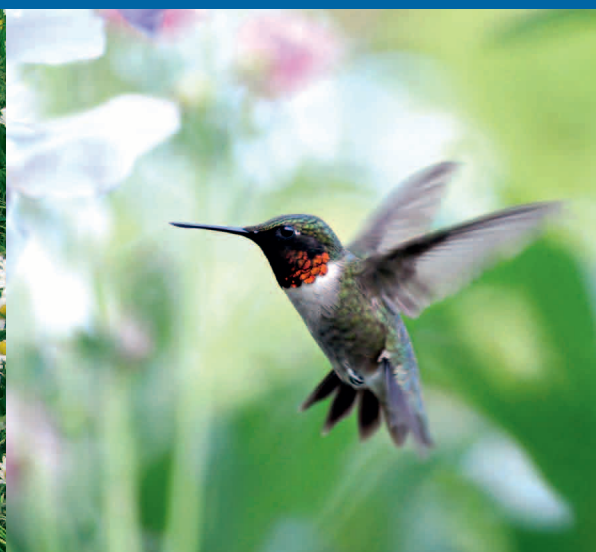

VacuAide 7305

The VacuAide is small and lightweight for ease of portability. It is ideal for home or hospital use and meets the stringent ISO 10079-1 standards for emergency transport suction.

The 7305 model is available in two options; the 7305P-U with a 800ml disposable collection bottle or the 7305P-US with a 1200ml re-usable collection bottle. The VacuAide can be used from its internal battery or directly from the power supply.

Product Features

- High performance capabilities with a vacuum range of 80 - 550 mmHg and a flow range of 0 - 27 l/min.
- Meets the stringent ISO 10079-1 standard.
- Comes complete with a rechargeable battery, 12 V DC in car charger, UK mains lead and carry case.
- Has a switch mode power supply allowing operation on any AC voltage 100 V - 240 V.
- Has an integrated bacterial filter.
- Automatic float shut-off to prevent overflow into the unit
- Available with an 800ml disposable or a 1200ml reusable collection bottle

Battery Features

- Uses a rechargeable battery with 60 minutes run time
- Automatically recharges when connected to the power supply
- 12 V DC capability for vehicle charging

Areas of Application

- Bronchial / Oral Hygiene
- Provides effective airways clearance
- Helps to control infection



SPECIFICATIONS

Dimensions (H x W x D)

22.9 x 17.8 x 20.3 cm

Weight

2.9 kg

Vacuum Range

80 - 550 mm Hg

Air flow

27 l/min.

Internal battery run time

60 min.

Operating Temperature Range

0° C - 40° C

Electrical Requirements

100 - 240 V AC, 50 / 60 Hz



1200 ml re-usable collection bottle



7305P-U with 800ml disposable bottle



DeVilbiss Healthcare Ltd.
Unit 3, Bloomfield Park, Bloomfield Road
Tipton, West Midlands DY4 9AP
United Kingdom
Phone + 44 (0) 121 521 3140
Fax + 44 (0) 121 521 3141
www.devilbisshc.com
enquiries@devilbisshc.com

Distributor:

VacuAide 7305

Aspirateur de mucosites



VacuAide 7305

Le modèle 7305 P est idéal pour une utilisation à domicile et répond aux rigoureuses normes ISO 601-1 pour l'aspirateur de mucosités de secours. Le 7305 P est compact et léger et grâce à ses hautes performances, répond aux besoins des patients.

Le 7305 P possède une batterie rechargeable interne et un cordon allume cigarette 12 V en option; il s'agit donc d'un modèle véritablement transportable.

- Batterie rechargeable, autonomie de 60 minutes
- Sacoche de transport incluse
- Cordon allume cigarette disponible en option

Champs d'application

- Hygiène des bronches et des voies respiratoires
- Aspiration des mucosités des voies respiratoires

Caractéristiques et avantages

- Alimentation électrique : 100 - 240 V
- Puissance d'aspiration jusqu'à 550 mmHg (730 mbar)
- Débit jusqu'à 27 lpm
- Compact et léger pour un transport facile
- Filtre bactérien intégré
- Soupape d'arrêt du flotteur automatique (aspiration obstruée)
- Bocal à usage unique de 800 ml (standard)
- Bocal réutilisable de 1200 ml, en accessoire
- Manomètre intégré



Bocal réutilisable de 1200 ml, en accessoire

S P É C I F I C A T I O N S

Dimensions (H x L x P)

23 x 18 x 20 cm

Poids (sans transformateur)

2,9 kg

Puissance d'aspiration

80 - 550 mmHg

Débit

0,0 - 27 l / min¹⁾

Adaptateur CA

110 - 240 V; 50 / 60 Hz

Autonomie batterie

60 min.

¹⁾ Ces conditions peuvent varier selon l'altitude par rapport au niveau de la mer, et les changements de pression atmosphériques.



DeVilbiss
HEALTHCARE

DeVilbiss Healthcare S.A.S.
13 - 17 Rue Joseph Priestley
37100 Tours
France
Tél.: + 33 (0) 2 47 42 99 42
Fax: + 33 (0) 2 47 42 99 44
www.devilbisshc.fr
enquetes@devilbisshc.com

Prestataire: