

drive

DeVilbiss
HEALTHCARE


Badelift bellavita

Der **Leichteste** seiner Klasse!



Badelift bellavita

Vorteile, die überzeugen ...

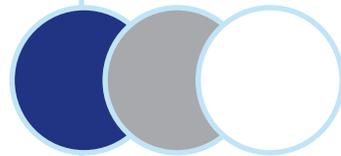

1 Bezüge in 3 Farben erhältlich!

2 Wiegt nur 9,3 kg!

3 Passt in jede Badewanne!

4 Hygieneaussparung!



Bezüge in 3 Farben erhältlich

... für einen unbeschwertem Badegenuss!

1 Der einzige Badelift mit nur 9,3 kg Gewicht!
Geringes Gewicht – maximale Belastbarkeit und Stabilität. Das Bellavita-Design beweist, hier ist Funktion zeitgemäß in Form gebracht.

2 Minimale Sitztiefe – maximales Badevergnügen.
Es sind keine Höhenadapter erforderlich, auch nicht bei tiefen Wannen bis 48 cm Höhe. Man kann also stets die optimale Badetiefe nutzen.

3 Hoher Komfort durch Hygieneausparung und ergonomisch geformten Rücken!
Die Hygieneausparung erleichtert die Intimhygiene. Zusätzlicher Komfort: Sitz- und Rücken-teil sind ergonomisch geformt.

4 Schwimmfähige und bequeme Handsteuerung bietet optimale Sicherheit.
Die Funktionstasten haben für Nutzer mit geschwächtem Sehvermögen unterschiedliche Formen und Farben. Die gelbe Kontroll-Lampe blinkt, wenn der Akku fast leer ist. Der Strom reicht dann noch für einen kompletten Badevorgang! Der integrierte Akku lässt sich jederzeit schnell aufladen.

5 Kein Montageaufwand – einfache Handhabung.
Auspacken – Sauger anbringen – fertig! Schnelle Reinigung durch glatte Oberflächen und geschlossene Rückenlehne. Der Lift lässt sich ohne große Kraftanstrengung anheben, da die Frontsauger dabei automatisch belüftet werden.

6 Der einzige Badelift mit integrierten Tragegriffen an Liftrücken und Untergestell!
Bellavita ist leicht und kompakt. Er lässt sich zusammenfalten oder in zwei Teile zerlegen und daher einfach transportieren bzw. verstauen. (Gewicht à 3,8 kg und 5,5 kg!)



Rückenansicht





Badelift bellavita

TECHNISCHE DATEN

PRODUKTBEZEICHNUNG	Bestellnummer
Badelift Bellavita ohne Bezug*	Art.-Nr. 465 100 100
Badelift Bellavita Classic weiß	Art.-Nr. 465 100 252
Badelift Bellavita Classic blau	Art.-Nr. 465 100 312
Badelift Bellavita Classic grau	Art.-Nr. 465 100 432
Badelift Bellavita Comfort weiß	Art.-Nr. 465 200 252
Badelift Bellavita Comfort blau	Art.-Nr. 465 200 312
Badelift Bellavita Comfort grau	Art.-Nr. 465 200 432

* Die Sitzfläche des Bellavita ist strukturiert und auch ohne Bezug einsatzbereit.

BELASTBARKEIT	
Max. Körpergewicht	140 kg

GEWICHT	
Gewicht gesamt inkl. Handsteuerung:	9,7 kg
Gewicht ohne Handsteuerung:	9,3 kg
Gewicht Sitzeinheit:	5,5 kg
Gewicht Antriebs-/Rückeneinheit:	3,8 kg
Gewicht Handsteuerung inkl. Akku:	0,4 kg

ABMESSUNG	
Länge gesamt (bei abgesenkter Rückenlehne):	ca. 830 mm
Breite gesamt (Sitzplatte inkl. Seitenklappen):	ca. 700 mm
Sitzbreite:	ca. 350 mm
Sitztiefe:	ca. 420 mm
Sitzplatte Gesamtlänge:	ca. 570 mm
Sitzhöhe (min./max.):	ca. 60 mm / ca. 480 mm
Rückenlehne (Höhe/Breite):	ca. 640 mm / 320 – 360 mm
Rückenlehnenverstellung:	von 10° bis 50°
Bodenplatte (Breite/Länge):	310 mm / 560 mm

AKKU	
Lithium-Ionen, wiederaufladbar:	12 V, 1,3 Ah
Abschaltautomatik:	30 Minuten max.
Ladedauer:	4 Stunden max.

HILFSMITTELNUMMER	
Bellavita ohne Bezug	04.40.01.0054
Bellavita mit Bezug Classic	04.40.01.0055



Praktisch: Die Halterung für die Handsteuerung



Einfach: Den Stecker der Handsteuerung am Liftrücken einstecken



Sauber: Aktiv-Schaumreiniger: Kunststoff-spezialreiniger auch geeignet für alle anderen Drive Produkte